



Protocole Bionano Prep Stratys™ DLS-G2

NUMÉRO DE DOCUMENT:

CG-00070-5

RÉVISION DU DOCUMENT:

C

Date d'entrée en vigueur :

20/10/2025

Table des matières

Historique des révisions	3
Vue d'ensemble du protocole Bionano Prep DLS-G2	4
ÉTAPES DU PROTOCOLE	4
Matériel fourni dans le kit de marquage Bionano Prep DLS-G2 et matériel à fournir par l'utilisateur	5
Introduction et remarques importantes	8
INTRODUCTION	8
REMARQUES IMPORTANTES	9
MANIPULATION DE L'ADN GENOMIQUE	10
Protocole Bionano Prep DLS-G2	12
PRÉPARATION	12
MARQUAGE PAR L'ENZYME DLE-1	12
NETTOYAGE DU DL-GREEN	14
COLORATION ET HOMOGÉNÉISATION DE L'ADNg	16
CHARGEMENT DE LA PUCE STRATYS CHIP	19
Assistance technique	20
Avertissement légal	21
BREVETS	21
MARQUES DE COMMERCE	21


Historique des révisions

RÉVISION	REMARQUES
A	Publication initiale

Vue d'ensemble du protocole Bionano Prep DLS-G2

Le kit Bionano Prep DLS-G2 (Direct Label and Stain-G2) est un kit de marquage spécifique de séquence pour le marquage de l'ADN génomique (ADNg) de très haut poids moléculaire, au moyen de l'enzyme de marquage direct DLE-1 (Direct Labeling Enzyme), en vue d'une utilisation sur la plateforme Bionano de cartographie optique du génome.

ÉTAPES DU PROTOCOLE

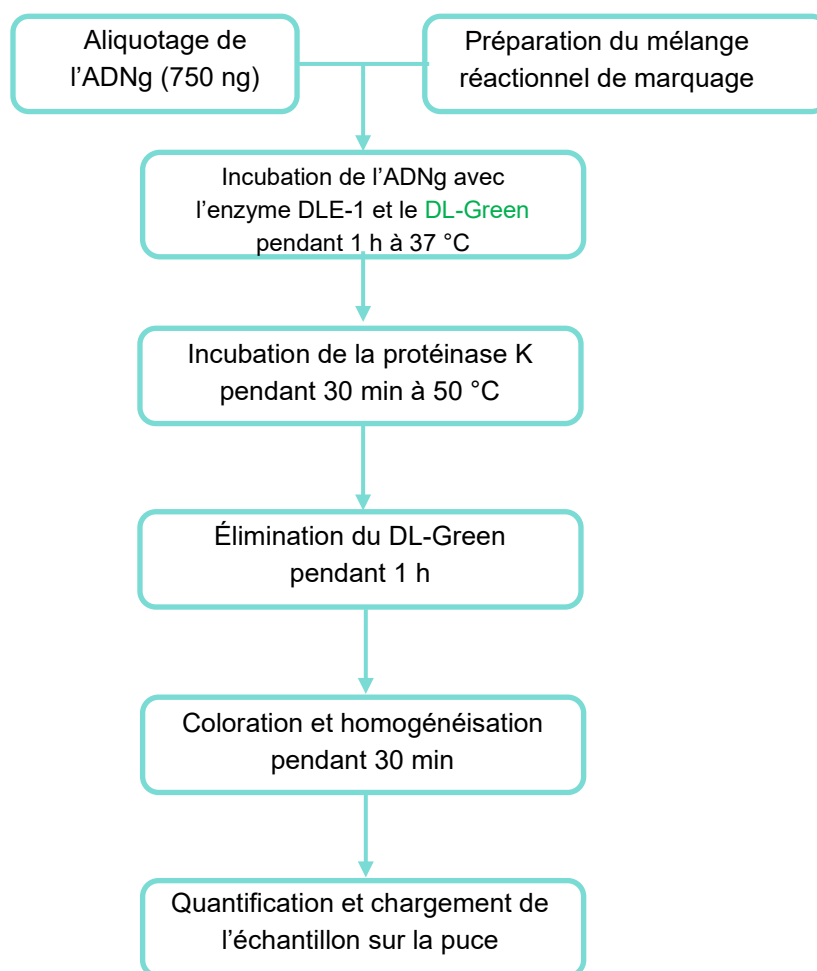

Matériel fourni dans le kit de marquage Bionano Prep DLS-G2 et matériel à fournir par l'utilisateur

Tableau 1a. Contenu du kit de marquage Bionano Prep DLS-G2 (n° de réf. 80117, 24 preps)

Composant	N° de référence	Quantité	Conservation	Considérations de manipulation
10X DLE-1 enzyme DLE-1 10X	20536	88 µl	-25 °C à -15 °C	Le tube doit être tapoté 3 fois pour en mélanger le contenu, puis centrifugé brièvement. À conserver sur un portoir réfrigérant de manière à maintenir la température de l'enzyme à -20 °C jusqu'à utilisation.
20x DL-Green	20537	44 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver sur un portoir en aluminium, qui a été réfrigéré au préalable, jusqu'à utilisation.
5X DLE-1 Buffer tampon DLE-1 5X	20535	350 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation.
DNA Stain colorant pour ADN	20538	130 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation ; le DMSO contenu dans le colorant pour ADN cristallise lorsqu'il est placé sur de la glace.
10x DTT*	20534	190 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation.
Proteinase K Protéinase K	20533	120 µl	2 °C à 8 °C	
4X Flow Buffer tampon de flux 4X	20531	480 µl	2 °C à 8 °C	À vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation.
Ultra Pure Water eau ultra pure	20532	1800 µl	2 °C à 30 °C	Peut être conservée à température ambiante.
DLS 24 Well Plate Plaque 24 puits DLS	20357	Une plaque	15 °C à 30 °C	À conserver recouverte, pour éviter les dépôts de poussière.
DLS Membranes Membranes DLS	20358	25 ea.	15 °C à 30 °C	À conserver à l'abri de l'humidité.
DLS Tape Sheets bandes de protection DLS	20529	24 ea.	15 °C à 30 °C	
DLS Amber Tubes (2 ml) Tubes ambrés DLS (2 ml)	20530	24 ea.	15 °C à 30 °C	

*Tube non utilisé dans ce protocole

Ou

Tableau 1b. Contenu du kit de marquage Bionano Prep DLS-G2 (n° de réf. **80046, 12 preps**)

Composant	N° de référence	Quantité	Conservation	Considérations de manipulation
10X DLE-1 enzyme DLE-1 10X	20430	44 µl	-25 °C à -15 °C	Le tube doit être tapoté 3 fois pour en mélanger le contenu, puis centrifugé brièvement. À conserver sur un portoir réfrigérant de manière à maintenir la température de l'enzyme à -20 °C jusqu'à utilisation.
20X DL-Green	20429	22 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver sur un portoir en aluminium, qui a été réfrigéré au préalable, jusqu'à utilisation.
5X DLE-1 Buffer tampon DLE-1 5X	20428	175 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation.
DNA Stain colorant pour ADN	20356	65 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation ; le DMSO contenu dans le colorant pour ADN cristallise lorsqu'il est placé sur de la glace.
10X DTT*	20432	90 µl	-25 °C à -15 °C	À laisser décongeler à température ambiante. Puis à vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation.
Proteinase K Protéinase K	20434	60 µl	2 °C à 8 °C	
4X Flow Buffer tampon de flux 4X	20431	225 µl	2 °C à 8 °C	À vortexer et à centrifuger brièvement. À conserver à température ambiante jusqu'à utilisation.
Ultra Pure Water eau ultra pure	20355	900 µl	2 °C à 30 °C	Peut être conservée à température ambiante.
DLS 24 Well Plate Plaque 24 puits DLS	20357	Une plaque	15 °C à 30 °C	À conserver recouverte, pour éviter les dépôts de poussière.
DLS Membranes Membranes DLS	20358	25	15 °C à 30 °C	À conserver à l'abri de l'humidité.
DLS Tape Sheets bandes de protection DLS	20433	12	15 °C à 30 °C	
DLS Amber Tubes (2 ml) Tubes ambrés DLS (2 ml)	20437	14	15 °C à 30 °C	

*Tube non utilise dans ce protocole

Tableau 2. Matériel à fournir par l'utilisateur

Article	Fournisseur	N° de référence
Mélangeur d'échantillons HulaMixer	Thermo Fisher	15920D
Thermocycleur avec couvercle chauffant	Fournisseur de matériel de laboratoire général	
Tubes pour PCR, 0,2 ml, à paroi mince, avec capuchon plat, exempts de nucléases	Thermo Fisher ou équivalent	AM12225
Microtubes, 0,5 ml, ambrés, exempts de nucléases	USA Scientific ou équivalent	1605-0007
Embouts de pipette à large orifice, avec filtre, 200 µl	USA Scientific ou Fisher Scientific (LabCon)	1011-8810, 1152-965-008-9
Embouts de pipette standard, avec filtre ; 2, 10, 20 et 200 µl	Fournisseur de matériel de laboratoire général	
Portoir réfrigérant de paillasse pour enzymes conçu pour maintenir la température à -20 °C	VWR ou équivalent	414004-286
Portoir en aluminium pour tubes, utilisé à 4 °C	Sigma Aldrich ou équivalent	Z740270
Pince courbe à bouts pointus	Electron Microscopy Sciences ou équivalent	78141-01
Pipettes (2, 10, 20 et 200 µl)	Fournisseur de matériel de laboratoire général	
Seau à glace et glace	Fournisseur de matériel de laboratoire général	
Agitateur vortex	VWR ou équivalent	10153-838
Microcentrifugeuse pour tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 ml	Fournisseur de matériel de laboratoire général	
Fluoromètre Qubit	Thermo Fisher	Q33238
Tubes de dosage Qubit®	Thermo Fisher	Q32856
Kit de dosage de l'ADN double brin Qubit® dsDNA HS (High Sensitivity)	Thermo Fisher	Q32851
Bain à ultrasons (optionnel)	Branson ou équivalent	CPX 952-119R
Pipette à déplacement positif MR-10 (recommandé)**	Rainin ou équivalent	17008575
Embouts de pipette C-10 pour pipette à déplacement positif, 10 µl (recommandé)**	Rainin ou équivalent	17008604

*(Articles en [bleu](#)) Nous recommandons vivement de ne pas substituer ces équipements et d'obtenir exactement les articles recommandés car leur utilisation donnera les meilleurs résultats au cours du flux de travail.

*Les thermocycleurs avec régulation de la température du couvercle ou offrant la possibilité d'allumer/éteindre la fonction de chauffage du couvercle sont acceptables pour notre flux de travail.

**Une pipette à déplacement positif est une pipette spéciale dotée d'un mécanisme qui actionne un piston intégré dans des embouts spéciaux qui vont avec la pipette. Une telle pipette et ses embouts sont très efficaces dans le pipetage et la distribution de petits volumes de liquides visqueux et il est fortement recommandé de les utiliser lors de l'aliquotage d'ADNg de très haut poids moléculaire isolé selon les protocoles de Bionano.

Introduction et remarques importantes

INTRODUCTION

Ce protocole décrit une approche enzymatique pour le marquage fluorescent direct de l'ADN génomique (ADNg) de très haut poids moléculaire (longueur allant de quelques centaines de kilopaires de bases à quelques mégapaires de bases) par l'enzyme de marquage direct DLE-1 au niveau d'un motif de séquence spécifique. Ce marquage direct n'introduit pas de coupures dans l'ADNg et permet aux utilisateurs de générer des cartes génomiques composées de très longues séquences contiguës, avec des N50 de 20 à 100 Mpb selon le génome et la qualité de l'échantillon.

Le kit Bionano Prep DLS-G2 contient les réactifs nécessaires pour marquer l'ADNg de très haut poids moléculaire au niveau d'une séquence spécifique en vue de réaliser une cartographie optique du génome sur le système Stratys® de Bionano. Après le marquage spécifique de la séquence reconnue par l'enzyme DLE-1, l'ADNg marqué est coloré pour pouvoir visualiser le squelette de l'ADN. Ainsi, les fluorophores DL-Green apparaissent sous forme de marqueurs verts sur une molécule bleue lorsqu'ils sont affichés sur l'instrument Stratys®.

La réaction DLE-1 en chiffres

Ce protocole permet d'obtenir 60 µl d'ADNg marqué. Ce volume est suffisant pour être chargé sur une Flowcell d'une puce Stratys et il reste suffisamment d'échantillon pour une analyse supplémentaire en cas de rendement faible ou autre problème. La longueur du matériel de départ doit être au moins de l'ordre de plusieurs centaines de kilobases. Si nécessaire, la taille peut être déterminée par électrophorèse en champs pulsés (ou PFGE pour pulsed field gel electrophoresis en anglais). La densité du marquage est mesurée sur l'instrument Stratys et exprimée en marqueurs pour 100 kilopaires de bases (kpb). D'autres paramètres liés au marquage peuvent être mesurés, notamment le taux de cartographie de la molécule analysée par rapport au génome de référence (map rate), le pourcentage de marqueurs présents en plus par rapport au génome de référence (positive label variance, PLV) et le pourcentage de marqueurs absents de la molécule par rapport au génome de référence (negative label variance, NLV). Consultez la section « Remarques importantes » ci-dessous pour plus d'informations.

Vous trouverez des informations détaillées sur les paramètres mesurés et les valeurs attendues dans le document Molecule Quality Report Guidelines (n° de réf. 30223).

REMARQUES IMPORTANTES

POINTS GENERAUX

- Il est recommandé d'utiliser un portoir en aluminium réfrigéré au préalable sur de la glace pour conserver les réactifs décongelés et préparer les réactions de marquage.
- Les enzymes et les tampons doivent être prélevés avec précision, sans gouttelettes sur la partie extérieure de l'embout de la pipette. L'enzyme doit être transférée en totalité dans le tube, en évitant soigneusement la formation de bulles pour garantir la reproductibilité des réactions. Les meilleurs résultats sont obtenus en plaçant les tubes de réactif au niveau de l'œil au moment du prélèvement ou de la distribution afin de bien voir ce que l'on fait.
- Il est essentiel que le mélange réactionnel de marquage soit mélangé lentement et minutieusement à la pipette avec l'ADNg : cette étape favorise l'homogénéité de l'ADNg qui est extrêmement visqueux et l'accessibilité de l'enzyme pour un marquage efficace.
- Ce protocole nécessite de manipuler des molécules fluorescentes sensibles à la lumière. Il est important de limiter le plus possible l'exposition à la lumière pendant les manipulations. Protégez de la lumière les réactions et les réactifs sensibles à la lumière pendant leur conservation.
- La concentration en ADNg marqué est mesurée le jour 1 ou 2, après le marquage, le nettoyage, l'homogénéisation et la coloration, et avant le chargement. L'homogénéité de l'ADNg est évaluée en procédant à 2 quantifications (coefficient de variation [CV] < 0,30). Si l'ADN marqué est homogène, l'estimation de la concentration sera précise et le chargement de l'ADNg sur la puce sera plus uniforme. La concentration de l'ADNg marqué doit être comprise entre 4 et 16 ng/μl.

Capacité de traitement

- Il est possible de traiter jusqu'à 12 échantillons en même temps.

Exigences relatives à l'ADNg de départ

- L'échantillon doit contenir de l'ADNg d'une longueur de l'ordre de la mégabase, ce qui est généralement indiqué par une viscosité élevée et/ou vérifié par PFGE.
- La concentration de l'ADNg doit être comprise entre 39 et 150 ng/μl.
 - Les échantillons d'ADNg dont la concentration est > 150 ng/μl doivent être dilués avec du tampon TE (pH 8,0) pour obtenir une concentration comprise entre 50 et 150 ng/μl, mélangés à 5 reprises à l'aide d'une pipette avec un embout à large orifice et laissés à température ambiante

pendant la nuit. Vérifiez la concentration finale de l'ADNg et l'homogénéité de la solution avant le marquage.

- Pour les échantillons d'ADNg dont la concentration est < 39 ng/μl, contactez l'assistance technique à l'adresse Support@bionano.com.

CONFIRMATION DE L'ENZYME A UTILISER POUR LE MARQUAGE

- Pour les échantillons non humains, il convient d'importer les données de séquence relatives à l'échantillon à analyser soit dans la fonction In Silico Digestion du logiciel Bionano Access®, soit dans le logiciel autonome [Label Density Calculator](#) pour s'assurer, avant de démarrer le protocole, que le marquage DLS--G2 est un choix approprié pour l'échantillon. La densité réelle du marquage doit se situer à ± 2 marqueurs de la densité du marquage attendue. Contactez l'assistance technique à l'adresse Support@bionano.com pour obtenir des conseils en cas de doute.
- Pour les échantillons non humains, les outils actuels d'analyse en aval sont les plus efficaces sur les génomes dont les densités du marquage DLS-G2 sont comprises entre 9 et 25 marqueurs pour 100 kpb.

MANIPULATION DE L'ADN GENOMIQUE

Généralités

- Ce protocole implique de manipuler de l'ADNg visqueux qui est difficile à pipeter avec exactitude. Il est essentiel de suivre toutes les étapes du protocole pour garantir un prélèvement précis de l'ADNg, afin d'obtenir des rapports enzyme/ADNg et ADNg/colorant appropriés, et de limiter le plus possible les manipulations inutiles de l'ADNg, lesquelles sont susceptibles de conduire à des molécules de taille insuffisante pour l'analyse.

Ajout de l'ADNg à la réaction de marquage

- Pour garantir un prélèvement précis à partir de la solution initiale d'ADNg visqueux, il est nécessaire que la solution initiale d'ADNg soit homogénéisée : une fois amenée à température ambiante, elle doit être mélangée délicatement à 5 reprises à l'aide d'une pipette avec un embout à large orifice. Il convient de suivre les directives ci-dessous pour assurer un pipetage correct par aspiration et refoulement avec une pipette standard, ou avec une pipette à déplacement positif, et une distribution complète.
- Avant de prélever l'ADNg visqueux dans un embout standard, pipetez un volume identique d'eau et indiquez le niveau de la solution sur l'embout avec un stylo à pointe fine pour servir de guide lors du piquetage de l'ADNg.

Conservez l'embout avec le repère comme guide et utilisez-en un autre pour aspirer l'ADN. Il est également possible d'utiliser une pipette à déplacement positif pour que le pipetage de l'ADNg visqueux soit plus uniforme.

- Pour prélever l'ADNg visqueux dans un embout standard, tenez le tube contenant la solution initiale d'ADNg de manière à le voir de près, poussez sur le piston de la pipette jusqu'à la première butée, immergez l'embout de la pipette jusqu'au milieu de la solution visqueuse et relâchez délicatement le piston, aussi **lentement** que possible, tout en déplaçant l'embout en un mouvement circulaire et en surveillant attentivement l'aspiration de l'ADNg durant le procédé. Maintenez l'embout immergé même après que la solution d'ADNg visqueux a cessé de monter et s'est stabilisée (utilisez l'embout avec le repère comme guide approximatif pour déterminer si la solution visqueuse atteint le niveau approprié). Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes pour que l'ADNg visqueux atteigne le niveau approprié. Un relâchement trop rapide du piston peut conduire à la formation d'une bulle dans l'embout et entraîner un prélèvement insuffisant (**REMARQUE:** l'utilisateur doit recommencer la procédure si cela se produit). Une fois que la solution dans l'embout de la pipette a atteint un niveau stable et avec l'embout encore immergé dans la solution d'ADNg, frottez l'embout à 5 reprises contre le fond du tube en décrivant un mouvement circulaire. Retirez l'embout de la solution d'ADNg et inspectez-le visuellement pour vérifier qu'il est rempli jusqu'au niveau approprié, en le comparant à l'embout avec le repère. Le retrait trop précoce de l'embout de la pipette hors de la solution d'ADNg ou un frottement inapproprié de l'embout sur le fond du tube peut entraîner la formation d'une bulle à l'extrémité de l'embout de la pipette, ce qui indique un prélèvement insuffisant (**REMARQUE:** l'utilisateur doit recommencer la procédure si cela se produit). **Il est possible de réaliser un pipetage précis de l'ADNg visqueux avec de la pratique et de la patience.**
- Pour déposer tout le volume d'ADNg visqueux dans un tube, tenez le tube à la main de manière à le voir de près et distribuez l'ADNg en immergeant l'embout de la pipette dans la solution : tout en surveillant la sortie de l'ADNg, appuyez délicatement sur le piston jusqu'à la première butée, puis jusqu'à la deuxième butée, jusqu'à ce que tout l'ADNg soit sorti de l'embout. Dès qu'il n'y a plus d'ADNg dans l'embout de la pipette, retirez immédiatement l'embout de la solution, tout en maintenant une pression constante pour éviter d'aspirer du liquide ou de faire entrer des bulles d'air. Inspectez visuellement l'embout après l'avoir sorti de la solution pour vérifier qu'il est vide.

Protocole Bionano Prep DLS-G2

PRÉPARATION

1. Laissez décongeler le DL-Green 20X. Vortexez-le bien, passez-le à la centrifugeuse et conservez-le sur de la glace dans un portoir en aluminium à 4 °C.
2. Laissez décongeler le tampon 5X DLE-1 Buffer. Vortexez-le bien et passez-le à la centrifugeuse. Conservez-le à température ambiante pour une utilisation ultérieure.
3. Tapotez à 3 reprises le tube d'enzyme 10X DLE-1 puis passez-le à la centrifugeuse. Conservez-le sur la paillasse dans un portoir pour enzyme à -20 °C.
4. Sortez le tube d'eau ultra pure de son lieu de conservation à 4 °C (le cas échéant) et gardez-le à température ambiante.

MARQUAGE PAR L'ENZYME DLE-1

Dilution de l'ADNg et ajout du mélange réactionnel de marquage

1. Si l'ADNg a été quantifié selon les instructions du protocole Bionano Prep SP juste avant le marquage, passez à l'étape 6. Dans le cas contraire, passez l'ADNg à la centrifugeuse pendant 2 secondes et procédez à une nouvelle quantification avant de passer à l'étape 6.
2. Dans un tube pour PCR à paroi mince, ajoutez 750 ng d'ADNg (a) à de l'eau ultra pure (b) de manière à obtenir un volume total de 19,5 µl. Utilisez le **Tableau 3** pour consigner les volumes d'ADNg et d'eau pour chaque échantillon.
 - a. $750 \text{ ng} / (\text{concentration de l'ADNg} [\text{ng}/\mu\text{l}]) = \mu\text{l d'ADNg}$
 - b. $19,5 \mu\text{l} - (\mu\text{l d'ADNg}) = \mu\text{l d'eau ultra pure.}$

Tableau 3. Calcul de la quantité d'ADNg

ID de l'échantillon d'ADNg	Concentration de l'ADNg (ng/µl)	Volume d'eau ultra pure (µl)	Volume d'ADNg (µl)

3. Préparez un mélange réactionnel de marquage dans un tube ambré de 0,5 ml. Ajoutez les composants dans l'ordre indiqué dans le **Tableau 4**. Mélangez à 5 reprises par aspiration et refoulement de la totalité du volume à l'aide d'une pipette munie d'un embout standard, en prenant soin de ne pas faire de bulles. Passez le tube à la centrifugeuse pendant 2 secondes et conservez-le dans un portoir en aluminium sur de la glace jusqu'à utilisation. Utilisez le mélange réactionnel aussi vite que possible après en avoir mélangé les composants.

Tableau 4. Tableau de calcul pour la préparation du mélange réactionnel de marquage

Réaction de marquage	Volume pour un échantillon	Nb d'échantillons	Surplus de mélange réactionnel	Total mélange réactionnel
5X DLE-1 Buffer (tampon DLE-1 5X)	6,0 µl		× 1,2	µl
20X DL-Green	1,5 µl		× 1,2	µl
10X DLE-1	3,0 µl		× 1,2	µl
Volume total du mélange réactionnel	10,5 µl			µl

4. À l'aide d'un embout de pipette standard, ajoutez 10,5 µl de mélange réactionnel au-dessus des 19,5 µl (ADNg + eau ultra pure). Réglez la pipette sur 28 µl, mélangez lentement l'échantillon par aspiration et refoulement à 7reprises (une aspiration + un refoulement = un mélange). Passez le tube à la centrifugeuse pendant 2 secondes. **ATTENTION: Protégez les échantillons de la lumière.** ⚠

REMARQUE: À toutes fins utiles, vous pouvez regarder la [vidéo](#) DLS Master Mix mixing à l'adresse [Support and Training Videos - bionanogenomics](#)

REMARQUE: Il est nécessaire de mélanger soigneusement et complètement l'échantillon pour que toutes les molécules soient correctement marquées. Aspirez l'échantillon depuis le fond du tube et déposez-le à proximité du haut (sans que l'embout de la pipette ne touche le tube) pour optimiser le mélange.

RÉACTION DE MARQUAGE

5. Mettez les tubes à incuber dans un thermocycleur dont le couvercle chauffant est réglé sur 47 °C – ou sur « On » si aucun choix de température n'est disponible :
 - a. Pendant 1 heure à 37 °C (température du thermocycleur)
 - b. Conservez à 4 °C jusqu'à l'étape suivante. **ATTENTION: Protégez les échantillons de la lumière.** ⚠

REMARQUE: Pendant l'incubation de la réaction de marquage dans le thermocycleur, préparez la microplaque pour le nettoyage du DL-Green (étape 8).

DIGESTION À LA PROTÉINASE K

6. Distribuez 5 µl de protéinase K directement au milieu de l'échantillon contenu dans le tube pour PCR. Pour éviter de retirer par inadvertance de l'ADNg qui pourrait adhérer à l'embout, ne mélangez pas.
7. Mettez à incuber dans un thermocycleur dont le couvercle chauffant est réglé sur 60 °C ou sur « On » si aucun choix de température n'est disponible :
 - a. Pendant 30 minutes à 50 °C (température du thermocycleur)
 - b. Conservez à 4 °C jusqu'à l'étape suivante. Après avoir retiré le tube du thermocycleur, passez rapidement à l'étape suivante. Centrifugez brièvement. **ATTENTION: Protégez les échantillons de la lumière.** ⚠

NETTOYAGE DU DL-GREEN

PÉPARER LA PLAQUE DLS À 24 PUIITS POUR LE NETTOYAGE DU DL-GREEN

REMARQUE: Les membranes peuvent être humidifiées dès que la réaction de marquage est mise en route. Assurez-vous- de fermer la plaque avec une bande de protection DLS de manière à assurer son étanchéité jusqu'à son utilisation.

8. **REMARQUE:** Pour les étapes 12 et 13, veuillez regarder la vidéo intitulée [DLS Membrane Demo](#) dans la partie Support du site internet de Bionano. Pour chaque échantillon, humidifiez la face inférieure d'une membrane DLS avec du tampon DLE-1 1X dans la microplaque fournie par Bionano :

- a. Pour chaque échantillon, préparez 30 µl de tampon DLE-1 1X (6 µl de 5X DLE-1 Buffer + 24 µl d'eau ultra pure). Vortexez pour mélanger. Passez à la centrifugeuse pendant 2 secondes.
- b. Déposez 25 µl de tampon DLE-1 1X au centre d'un puits de la microplaque DLS.
- c. Utilisez une pince à bout rond pour placer une membrane DLS sur le tampon.
- d. Apposez immédiatement une bande de protection DLS sur les puits pour éviter toute évaporation jusqu'à ce que vous soyez prêt à poursuivre.

REMARQUE: Assurez-vous que les membranes sont entièrement humidifiées au bout de 3 minutes. Les membranes humidifiées ont un aspect bleu translucide uniforme sur toute leur surface. Si une membrane n'est pas humidifiée au bout de 3 minutes, veuillez jeter la membrane et en humidifier une nouvelle dans le même puits. Contactez support@bionano.com pour toute question.

9. Nettoyez le DL-Green en déposant l'échantillon d'ADNg marqué au centre de la membrane humidifiée :
 - a. Maintenez fermement la plaque DLS à 24 puits et retirez soigneusement la bande de protection DLS.
 - b. À l'aide de la pipette munie d'un embout à filtre standard de 200 µl et réglée sur 37 µl, aspirez la totalité du volume (environ 35 µl) d'ADNg marqué.
 - c. Déposez soigneusement l'ADNg marqué au milieu de la membrane DLS humidifiée.
 - d. Répétez les étapes b. et c. pour tous les échantillons
 - e. Apposez une bande de protection DLS sur les puits contenant une membrane : tout en tenant la microplaque, appliquez une pression pour fixer la bande scellante sur le bord supérieur des puits afin d'éviter toute évaporation.
 - f. **ATTENTION: Protégez la microplaque de la lumière (couvercle)** ⚠ et laissez incuber à température ambiante pendant 1 heure. Assurez-vous que la plaque reste intacte et qu'elle n'est pas déplacée de manière accidentelle pendant l'incubation.
10. Pendant la période d'incubation de 1 heure, faites revenir les tubes de 4X Flow Buffer et DNA Stain à température ambiante. Une fois décongelés, vortexez bien tous les tubes et centrifugez brièvement pour faire descendre le contenu au fond des tubes. Maintenez tous les tubes à température ambiante jusqu'à ce vous soyez prêt à les utiliser.
11. Au bout d'1 heure, tenez fermement la plaque et retirez délicatement la bande de protection DLS.
12. À l'aide de la pipette munie d'un embout à filtre standard de 200 µl et réglée sur 35 µl, aspirez lentement la totalité de l'échantillon marqué en restant perpendiculaire à la membrane lorsque vous la touchez. Déplacez l'embout sur toute la zone contenant l'ADNg lorsque vous aspirez pour récupérer l'ADNg. Transférez l'ADNg

dans un nouveau tube pour PCR ou dans un microtube de 0,5 ml. Passez-le à la centrifugeuse pendant 2 secondes. **ATTENTION: Protégez les tubes de la lumière (couvercle).** ⚠

13. À l'aide d'une pipette munie d'un embout à filtre standard de 200 µl, transférez 20 µl de l'échantillon marqué du tube pour PCR ou du tube ambré de 0,5 ml dans un tube ambré à fond rond DLS (2 ml) et passez à l'étape suivante (coloration et homogénéisation de l'ADNg).
 - a. Si le volume d'échantillon récupéré est < 20 µl, portez le volume à un total de 20 µl en ajoutant du tampon DLE-1 1X.

COLORATION ET HOMOGENÉISATION DE L'ADNg

14. Préparez le mélange réactionnel de coloration selon le **Tableau 5**.

Tableau 5. Tableau de calcul pour la préparation du mélange réactionnel de coloration

Réaction de coloration	1 échantillon	Nb d'échantillons	Surplus de mélange réactionnel	Total mélange réactionnel
4X Flow Buffer	15 µl		× 1,25	µl
DNA Stain	3,5 µl		× 1,25	µl
Eau ultra pure	21,5 µl		× 1,25	µl
Volume total du mélange réactionnel de coloration	40 µl			µl

REMARQUE: Le tampon Flow Buffer est visqueux, par conséquent pipetez lentement les solutions qui en contiennent pour davantage de précision.

15. Pour chaque ADNg marqué, ajoutez 40 µl de mélange réactionnel de coloration sur le dessus de l'échantillon marqué (20 µl) contenu dans le tube ambré à fond rond DLS (2 ml). Ne mélangez pas.

REMARQUE: Le mélange réactionnel est distribué au-dessus de la solution afin d'éviter de prélever par inadvertance de l'ADNg qui pourrait adhérer à l'embout de la pipette.

16. Placez les tubes ambrés à fond rond DLS contenant les échantillons dans un mélangeur HulaMixer (Thermo Fisher) avec une vitesse réglée sur 5 tours par minute (tr/min). La surface du portoir de tubes doit être horizontale et parallèle à la surface de travail. Mélangez pendant 30 minutes à température ambiante en désactivant toutes les options hormis la rotation.

17. Au bout de 30 minutes, sortez les échantillons du HulaMixer. Passez-les à la centrifugeuse pendant 2 secondes.

REMARQUE: Ne laissez pas la rotation se poursuivre pendant plus de 30 minutes car cela pourrait diminuer le N50 de la molécule.

18. Si vous souhaitez procéder à l'acquisition des données le même jour, passez immédiatement à l'étape de quantification avant de charger les échantillons sur la puce Stratys Chip. Sinon, conservez les échantillons à 4 C, à l'abri de la lumière. ⚠

QUANTIFICATION DE L'ADNg MARQUÉ ET COLORÉ

Déterminez la concentration finale de l'ADNg marqué et coloré avant de le charger sur la puce Stratys Chip. Une concentration en ADNg (moyenne de 2 mesures) comprise entre 4 et 16 ng/μl permet d'obtenir les meilleurs résultats. Les variations au niveau de la concentration finale sont dues aux difficultés rencontrées pour prélever avec précision l'ADNg visqueux de départ et à la variabilité de la récupération de l'ADNg à l'étape de l'élimination du DL-Green. Si la concentration de l'échantillon ne se situe pas dans l'intervalle recommandé, consultez le Guide d'aide au dépannage (CG-30608) pour obtenir des recommandations.

Kit de dosage de l'ADN double brin Qubit® dsDNA HS (High Sensitivity) et fluoromètre Qubit:

REMARQUE: Le protocole standard du dosage Qubit dsDNA HS ne donnera pas des mesures exactes de la concentration de l'ADNg marqué en raison de sa longueur extrêmement importante. Le protocole Qubit a donc été modifié pour inclure une étape de sonication qui va fragmenter une aliquote de l'ADNg marqué et permettre d'obtenir des mesures exactes de la concentration. Reportez-vous au manuel d'utilisation du kit de dosage Qubit dsDNA HS pour obtenir des informations détaillées sur le kit.

1. À l'aide d'une pipette de 200 μl munie d'un embout à large orifice et réglée sur 50 μl, mélangez l'ADNg marqué et coloré à 5 reprises. Passez-le à la centrifugeuse.
2. Laissez les étalons Qubit HS Standards et l'ADNg marqué revenir à température ambiante pendant au moins 30 minutes.
3. Préparez des tubes de dosage Qubit de 0,5 ml :
 - a. 2 tubes de dosage distincts pour la mesure des étalons, contenant chacun 10 μl de tampon Qubit HS Buffer ;
 - b. 2 tubes de dosage distincts par échantillon marqué, chacun contenant 18 μl de tampon Qubit HS Buffer.
4. À l'aide d'une pipette standard ou d'une pipette à déplacement positif, prélevez 2 aliquotes distinctes de 2 μl à partir de chaque échantillon et transférez chacune dans un tube de dosage Qubit contenant 18 μl de tampon HS

Qubit Buffer, en plongeant l'embout dans le tampon. Placez les tubes Qubit dans un portoir flottant et soniquez dans un bain à ultrasons pendant 10 minutes. Pendant la sonication, préparez la solution de travail comme décrit à l'étape 5.

REMARQUE: Si vous remarquez un long filament d'ADNg fixé à l'embout lorsque vous sortez l'embout du tube, remettez l'échantillon dans le tube et répétez le prélèvement de l'aliquote avec un nouvel embout.

- a. En l'absence de bain à ultrasons, vortexez pendant au moins 30 secondes à vitesse maximale, puis passez brièvement à la centrifugeuse pendant 2 secondes.
5. Préparez la solution de travail en diluant le réactif Qubit dsDNA HS Reagent dans le tampon de dilution HS Dilution Buffer (1:200) :
 - a. préparez 200 µl de solution de travail pour chacun des 2 étalons (400 µl au total) ;
 - b. préparez 200 µl de solution de travail pour chaque aliquote d'échantillon (400 µl pour chaque échantillon).
6. Pour les étalons d'ADN Qubit, ajoutez 10 µl des étalons Standards 1 et 2 dans les tubes de dosage Qubit soigneusement étiquetés qui ont été préparés à l'étape 3a avec 10 µl de tampon Qubit HS.
7. Une fois la sonication terminée, sortez les tubes de dosage et centrifugez-les brièvement pour faire descendre la solution au fond des tubes. Vortexez les tubes pendant 5 secondes à vitesse maximale, puis passez-les à la centrifugeuse pendant 2 secondes.
8. Ajoutez 180 µl de solution de travail (préparée à l'étape 5) dans chaque tube d'ADNg marqué et soniqué, et dans chaque tube contenant un mélange étalon d'ADN Qubit plus tampon HS Buffer. Vortexez pendant 5 secondes et centrifugez brièvement pour faire descendre la solution au fond des tubes.
9. Laissez incuber les échantillons dans l'obscurité pendant 2 minutes avant de procéder à la quantification sur le fluoromètre Qubit.
10. Consignez les mesures Qubit dans le **Tableau 6**.

REMARQUE: La concentration de l'ADNg marqué doit dans l'idéal se situer entre 4 et 16 ng/µl avec un CV (écart-type ÷ moyenne) inférieur à < 0,30. Si les 2 mesures se situent en dehors de l'intervalle allant de 4 à 16 ng/µl, consultez le Guide d'aide au dépannage (CG-30608). Si une mesure se situe entre 4 et 16 ng/µl et que l'autre est en dehors de cet intervalle, procédez comme suit :

- ❖ Si une mesure se situe entre 4 et 16 ng/µl et que l'autre est supérieure à 16 ng/µl, passez au chargement de la puce.
- ❖ Si une mesure se situe entre 4 et 16 ng/µl et que l'autre est inférieure à 4 ng/µl, mélangez à nouveau avec le HulaMixer pendant 30 minutes (en repartant de l'étape 20 dans la section « Coloration et homogénéisation de l'ADN ») et recommencez la quantification.

ID de l'échantillon	Mesure 1 (ng/μl)	Mesure 2 (ng/μl)	Moyenne (ng/μl)	CV (ÉT/moyenne)
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible.

11. Si les échantillons ne sont pas analysés immédiatement, conservez-les dans l'obscurité à 4 °C jusqu'à utilisation.

CHARGEMENT DE LA PUCE STRATYS CHIP

Reportez-vous au *Stratys System User Guide* (CG-00041) pour des instructions complètes sur le chargement de la puce et le fonctionnement de l'instrument.

REMARQUE: Pour procéder au chargement de la puce, prélevez l'échantillon marqué DLS en aspirant dans le milieu du tube.

Assistance technique

Si vous avez besoin d'aide, contactez l'assistance technique de Bionano Genomics.

Vous pouvez vous procurer la documentation sur les produits Bionano, les FDS, les certificats d'analyse, les fichiers de foire aux questions et d'autres documents associés dans la partie Support du site internet de Bionano , ou sur demande par e-mail et par téléphone.

TYPE	CONTACT
E-mail	support@bionano.com
Phone	Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00, Heure normale du Pacifique États-Unis : +1 (858) 888-7663
Site internet	www.bionano.com/support
Adresse	Bionano Genomics, Inc. 9540 Towne Centre Drive, Suite 100 San Diego, CA 92121

Avertissement légal

Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

Le présent document est protégé par la législation des États-Unis sur le droit d'auteur et par les traités internationaux. L'utilisation non autorisée de ce document est interdite. Aucune partie de la publication ne peut être copiée, reproduite, distribuée, traduite, transmise ou faire l'objet d'ingénierie inverse sous quelque forme, par quelque support ou quelque moyen que ce soit, connu ou inconnu à l'heure actuelle, sans l'autorisation expresse écrite et préalable de Bionano Genomics. La copie, en vertu de la loi, comprend la traduction dans une autre langue et dans un autre format. Les données techniques contenues dans les présentes sont réservées aux destinations ultimes autorisées par la législation des États-Unis. Tout détournement à la loi américaine est interdit. La présente publication contient les dernières informations disponibles au moment de la parution. En raison des efforts continus d'amélioration du produit, des modifications techniques peuvent être apportées sans être reflétées dans le présent document. Bionano Genomics se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques et aux autres informations contenues dans la présente publication à tout moment et sans préavis. Veuillez contacter le service client de Bionano Genomics pour obtenir les dernières informations en date.

BIONANO GENOMICS DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PRÉSENT DOCUMENT, NOTAMMENT ENTRE AUTRES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION POUR UN OBJECTIF PARTICULIER. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, BIONANO GENOMICS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE, QUE CE SOIT EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE GARANTIE, DE TOUTE LOI OU DE TOUTE AUTRE BASE, DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS, MULTIPLES OU CONSÉCUTIFS EN RAPPORT AVEC OU DÉCOULANT DE CE DOCUMENT, NOTAMMENT ENTRE AUTRES, QUANT À L'UTILISATION DE CELUI-CI, QUE CES DOMMAGES SOIENT OU NON PRÉVISIBLES ET QUE BIONANO GENOMICS AIT OU NON ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DESDITS DOMMAGES.

BREVETS

Les produits de Bionano Genomics® peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets aux États-Unis ou à l'étranger.

MARQUES DE COMMERCE

Le logo Bionano Genomics et les noms des produits ou services de Bionano Genomics sont des marques déposées ou des marques de commerce détenues par Bionano Genomics aux États-Unis et dans certains autres pays.

Bionano™, Bionano Genomics®, Bionano Access™, Stratys™, Stratys™ Compute, and the Stratys™ Chip sont des marques de commerce de Bionano Genomics, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

Aucune licence d'utilisation d'aucune marque de commerce de Bionano Genomics n'est accordée de manière expresse ou implicite. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser ces marques de commerce sans le consentement écrit préalable de Bionano Genomics. L'utilisation de ces marques de commerce ou de tout autre document, à l'exception de ce qui est autorisé dans les présentes, est expressément interdite et peut constituer une violation des lois fédérales ou des autres lois en vigueur.

© Copyright 2025 Bionano Genomics, Inc. Tous droits réservés.